

動作確認チェックシート

検査日	2016年 5月 26日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	デジタルマイクロスコプ	電源電圧	3相 100 V 单相 W	
型式	VC-7700	周波数	50・60 Hz	
メーカー名	オムロン			
機械Ser.No	0215Z07			
製造年月	—			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1.装置起動⇒起動時、一連の動作及び異常音問題なし。

2.弊社所有の標準サンプルを用いて観察⇒問題なし。(図.1 図.2参照)

標準サンプル(ミツトヨ 10-14Z-2)を用いて0.4 μmの部分を計測機能を使用して距離を測定。



X方向計測 図.1



Y方向計測 図.2

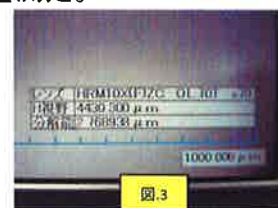


図.3

3.3D表示⇒3D表示機能を確認問題なし。(図.4参照)

4.取り込み画像の倍率を確認。



図.4



全体外観図.4

取扱説明書(有)無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(○)NG)

作業工数[6 H]

検査担当者[

雨宮(耕)

ユーザー名[

]出荷日

年

月

日

