

管理番号

GP8PB0

動作確認チェックシート


検査日	2015年 9月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	真空デシケータ	大きさ(W×D×H)	250×255×330mm		
型式	不明				
メーカー名	サンプラテック				
機械Ser.No	不明				
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△(※)
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	-
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

※容器側面板、底面板の内部にひび有り(真空引きには支障なし)

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ダイヤフラムポンプ(ULVAC製 DA-30S)を用いて、デシケータの真空引きを実施。
使用ポンプの能力-580mmHg(23.9kPa)に対し、-550mmHg(28.0kPa)まで到達した。
3min密閉放置したが、圧力上昇なく問題なし。

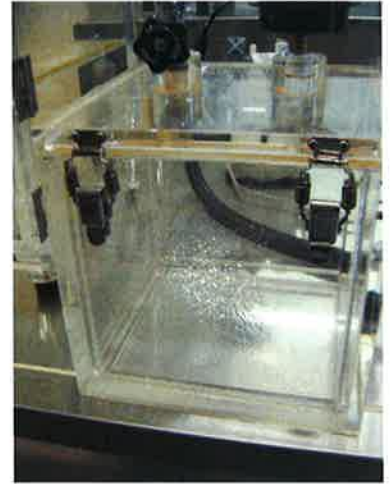

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2015年9月11日	圧力計なかったため代替品取付け。	野沢

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作 OK NG 作業工数[1.5H]

検査担当者[野沢]

