

管理番号

H60637

## 動作確認チェックシート


検査日	2019年 7月 29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	遠心機(大容量冷却)	電源電圧	単相 200V 21A	最大処理量	3780 ml
型式	9920	周波数	50/60 Hz	温度使用範囲	-9 ~ 40°C
メーカー名	久保田商事	消費電力/発熱量	2.6Kw・9.4MJ/hour	ドア開き時高さ	1570 mm
機械Ser.No	M10044-E000	最大回転数	3000 rpm	外寸(mm)	W730D830H1080
製造年月	年 月	最大遠心力	2490 xg	重量	365 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△※1
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境(室温26°C 湿度26%)

・外観 …キズ、塗装剥がれ有

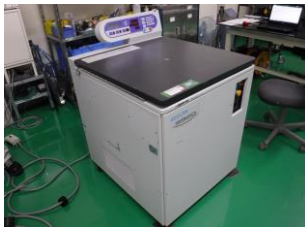※1 熱交換器(コンデンサー)潰れ有り  
冷却動作に問題無し

熱交換機 潰れ有り

・チャンバー室 冷却確認(仕様-9°C)

チャンバー内22.7°Cから-8°C 冷却まで約20分  
仕様上、-9°Cまで使用する事が出来ますが  
オーバーシュート時にアラームが発生しますので  
-8°Cが設定の限界と判断します。

・運転ランプ点灯 確認



運転中…緑



運転終了…青

・回転数 確認


付属品 ローター(Model RS-3900)

仕様：最高回転数 3000 rpm  
最大遠心力 2490 xg  
最大処理量 3780 ml付属ローターの最大回転数3000 rpm 5分間 回転確認  
異音 及び ブレも無く終了 確認

・各スイッチ 確認

操作パネルスイッチ動作 問題無し

装置前面START/STOPスイッチ連動 確認

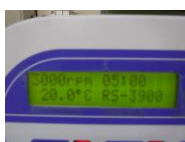

設定値



実際値



前面スイッチ



操作パネルスイッチ

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 3H ]

検査担当者[ Tokunaga ]

ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日

