

管理番号

120389

動作確認チェックシート

検査日	2019年 9月 9日	(機械の仕様・規格を記入する)			
商品名	電子天秤	電源/ACアダプター	100V/12VDC		
型式	WXS205SDUV	周波数	50/60Hz		
メーカー名	METTLER TOLEDO	Temp	10°C…30°C		
機械Ser.No	B231163556	秤量	220g		
製造年	2003年	目量(最小表示)d	0.01mg/0.1mg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


1.外観確認。→問題なし

2.弊社所有分銅による計量実施。→基本的な計量結果OK(下記表による)

2-1.繰り返し性テスト(同じ分銅を5回計量しその誤差を記入。(使用分銅 20g、誤差 1.03mg))

2-2.直線性テスト(無加重、最大秤量の約25%,50%,75%夫々を計測)

1	20001.66
2	20002.69
3	20001.86
4	20001.95
5	20002.18
誤差	1.0300

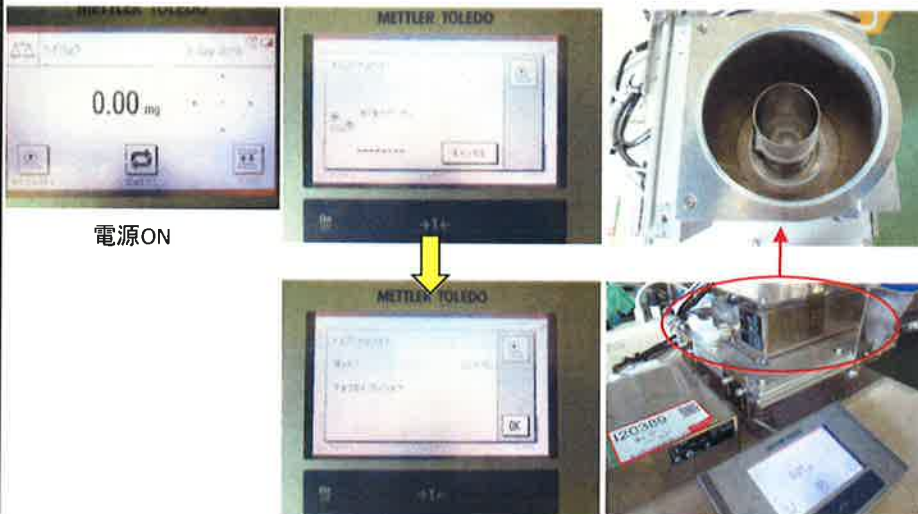

無加重	0.54~-0.64
25%(55g)	55001.49
50%(110g)	109998.41
75%(165g)	165001.4
最大秤量(215g)	215001.9
最大誤差	1.9mg

取扱説明書: 無

"int.チヨウセイ"完了

秤量部

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: OK 作業工数[3.0 (hr)]
 検査担当者[雨宮]

※ディスペンス量計測システムのソフトがない為
 電子天秤のみとしての動作確認。

