


動作確認チェックシート

検査日	2023年 11月 10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	グローブボックス	電源電圧	単相100V, 5A	パージ・排気口	なし
型式	HCB-BM	周波数	50Hz ※殺菌灯が50Hz, 蛍光灯(LED)は50/60Hz		
メーカー名	柴田ハリオガラス(株)	大きさ(W×D×H)	615×520×530mm		
機械Lot.No	ASK-121	蛍光灯	20型(12W)		
製造年月	1991年9月	殺菌灯	10W(東芝GL-10)		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 外観:グローブ挿入口のゴム一部が破れてなし。開閉蓋のパッキンに劣化が見られる。紫外線下での作業には支障なし。
- 2 蛍光灯・殺菌灯点灯、前面扉動作問題なし。但し殺菌灯の劣化が認められる。
- 3 その他:ボックス内コンセントの100V供給問題なし。

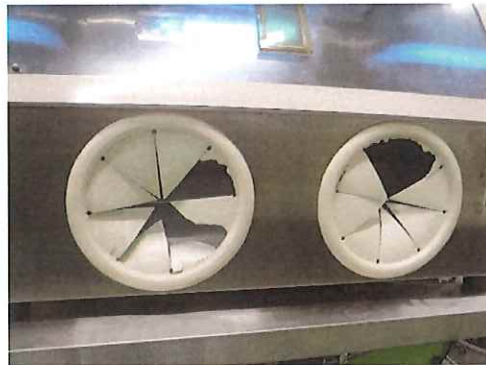

取扱説明書(無)

蛍光灯(LED)点灯

殺菌灯点灯

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2023年11月10日	蛍光灯劣化。LED(20W型)に交換	野沢

File Maker入力

動作(条件付きOK) 作業工数[2H]
検査担当者[野沢]

(備考欄コメント)

グローブ付属なし。

[責任者]

