

管理番号

L70241


# 動作確認チェックシート

検査日	2022年3月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダイヤフラム真空ポンプ	電源電圧	単相AC100V		
型式	DA-30D	周波数	50/60Hz		
メーカー名	アルバック	排気速度	30/36L/min(50/60HZ)		
機械Ser.No	070026T	到達圧力	6.65KPa		
製造年月		ゲージ圧表示	(-94.6KPa)		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 弊社真空度計で-92.7KPa到達を確認。
- 弊社基準値:仕様ゲージ圧表示の5%(-89.8KPa)以内。
- 1時間の連続運転実施:問題なし。

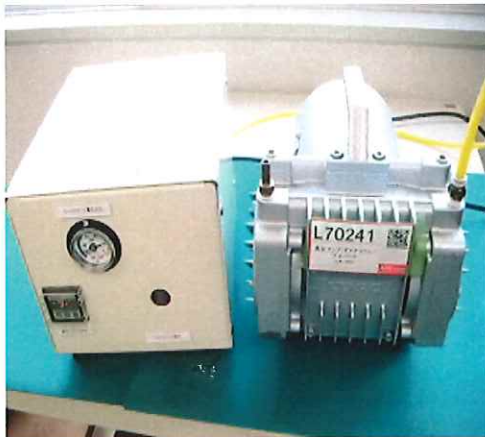

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2022年3月25日	ダイヤフラム交換(2枚)・内部清掃	廣瀬

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 4H ]

検査担当者[ 廣瀬 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

