

動作確認チェックシート

検査日	2021年 9月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	電子秤	電源電圧	単2電池×3本 又は専用ACアダプタ	繰返し性	0.1g
型式	ACX221	(周波数)	(50・60Hz兼用)	直線性	0.1g
メーカー名	アズワン	計量皿寸法	128mm×142mm	校正外部	200g
機械Ser,No	無し	ひょう量(最大)	220g	本体重量	約0.5kg
本体寸法	W135×D201×H41	最小表示	0.1g	オプション品	ACアダプター無し

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


- 1、外観確認。→外観確認問題なし。
- 2、社内測定用おもりにて計量測定実施。→計量は動作問題なし。
(但し、校正は標準おもり200gで実施後測定。下記参考データによる。)

計量測定

測定用重りg	測定表示値g	偏差値g
0.1	0.1	0
0.2	0.2	0
0.5	0.5	0
1	1.0	0
2	2.0	0
5	5.0	0
10	10.0	0
20	20.0	0
50	50.0	0
100	100.0	0
200	200.0	0
(200+20)	220.0	0

天秤皿5ポイント測定

最大偏差0g

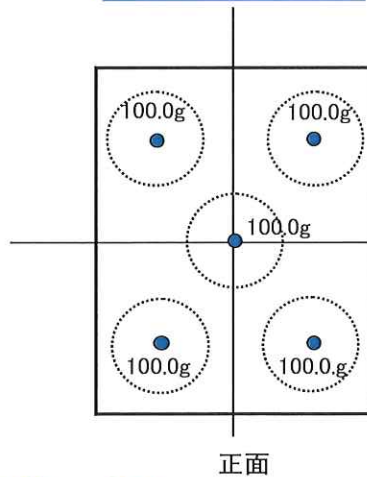

2022年7月25日再行w)問題なし野沢

取扱説明書(有) ①計量測定(直線性)誤差0. ②5g計測定 誤差0. ③10回繰り返し測定(再現性)100gで誤差0. 早川

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[2.5H]
 検査担当者[小林 (克)]
 ユーザー名[

(備考欄コメント)

ACアダプターは元々付属していません

[責任者]

】出荷日 年 月 日

