

管理番号

M50330

動作確認チェックシート

検査日	2025年4月16日	(機械の仕様・規格を記入する)			
商品名	電子天秤	電源	ACアダプター 12V 1A	本体寸法	190Wx317Dx78Hmm
型式	UW220H	秤量	220g	本体重量	3.4kg
メーカー名	SHIMAZU	最小表示	0.001g		
機械Ser.No	D447111037	外部校正範囲	100-220g		
製造年	—	計量皿寸法	108x105mm		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1.外観確認。→問題なし



2.CALIBRATION(機器内部自動感度調整)実施

3.弊社所有分銅による計量実施。→基本的な計量結果:OK(下記表による)

3-1.繰り返し性テスト(同じ分銅を10回計量しその誤差を記入。(使用分銅200g、誤差0.002g)

3-2.直線性テスト(無加重、最大秤量の約25%,50%,75%夫々を計測)

4.計量皿内バラツキ確認(100g分銅にて確認 (最大バラツキ0.001g))

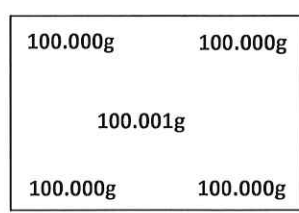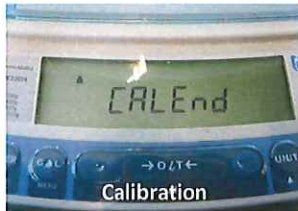

取扱説明書:有

計量皿内バラツキ

繰り返し性テスト(g)		直線性テスト(g)	
1	200.000	無加重	0.000
2	200.000	25%(55)	55.001
3	200.000	50%(110)	110.002
4	200.002	75%(165)	165.002
5	200.001	最大秤量(220)	220.001
6	200.001	最大誤差 0.002g	
7	200.000		
8	200.000		
9	200.000		
10	200.000		
誤差	0.002g		

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[2.5 hr]

検査担当者[雨宮]

※calibration時音が大き目だが、感度調整に問題は無。

