


動作確認チェックシート

| | | | | | |
|----------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 検査日 | 2023年4月19日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | | |
| 商品名 | 赤外線顕微鏡 オールインワン顕微FT-IR | 電源 | AC100V /3.2A | 試料ステージ | 70x127mm 高速電動ステージ |
| 型式 | Nicolet iN10MX | 観察方式 | 可視画像 赤外スペクトル同時観察 | 電動ステージコントロール | ソフトウェアジョイスティック |
| メーカー名 | Thermo Fisher SCIENTIFIC | 対物鏡倍率 | 15x作動距離16mm | 顕微FT-IR | 25000:1以上 |
| 機械Ser,No | ALK0900198 | 集光鏡倍率 | 15x作動距離16mm | 寸法 | (W)63x(D)66x(H)54mm |
| 製造年 | — | 測定モード | 透過、反射、ATR | 重量 | 80kg |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|--|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。 | — |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.電源投入→弊社所有PCにソフトウェアインストール問題なし。
- 2.FT-IR電源投入→イニシャライズ確認完了問題なし。
- 3.本体-PC接続確認→(ソフトウェアジョイスティックにてステージ動作確認)問題なし。
- 4.可視画像確認→問題なし。

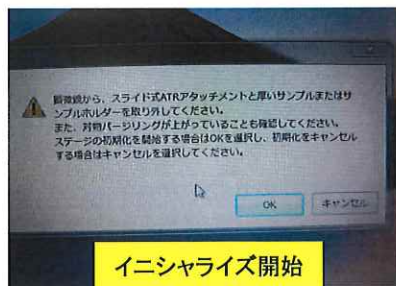

※PCは付属していません。

Windows XP/Vista対応 以上のPCに付属のソフトウェアをインストールしてください。

取扱説明書:無

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |

File Maker入力

動作:条件付きOK 作業工数[5.5 hr]

(備考欄コメント)

[責任者]

検査担当者[雨宮]

※性能試験はサンプルが付属していない為、実施していません。



性能確認試験(バリデーション)⇒スライド式ATRアタッチメント及びサンプルホルダー等が付属していない為
可視画像のみの確認。

