

動作確認チェックシート

検査日	2023年4月21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	安全キャビネット	電源電圧	AC100V2A	流入風速	0.5m/S
型式	VH-853BH-2A2	周波数	(50 / 60)Hz	重量	250Kg
メーカー名	日本医化機械製作所	照明	20W型LEDx2		
機械Ser.No	2104679	殺菌灯	15W型		
製造年月		集塵効率	0.3 μm(99.99%)		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 照明、殺菌灯点灯確認、コンセント問題無し 2 流入風速確認。
- 3 扉、開口部250mm、パーティクルカウンターで測定、1分5回測定、平均、0.3 μm1. 2個0.5 μm0個。
- 4 ガスバーナー、バーナー用フットSW無し。

開口部250mmパーティクルカウンター処理流量2.83L/min



取扱説明書(有)

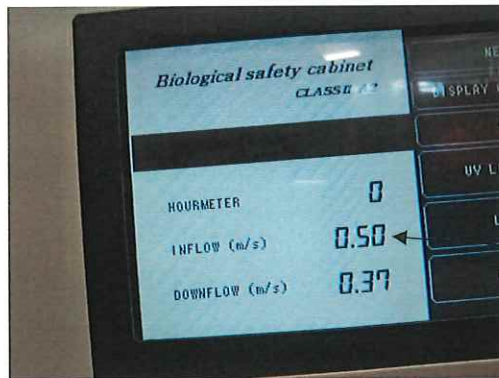

流入風速

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2024. 4. 25	再動作OK。	上田 (印)

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田

ユーザー名【]出荷日 年 月 日

