

# 動作確認チェックシート

検査日	2022年11月17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンオープン	電源電圧	三相200V	外寸wxdxh	900x1110x1490
型式	VDO-200N	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	アズワン	棚板	2枚		
機械Ser.No	302756	設定温度範囲	50°C~200°C		
製造年月		槽寸法	655x545x595		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


下方排気ダクトにシリコンチューブ入れ、弊社パーティクルカウンターで1分5回測定、平均0.3 μm5個、0.5 μm 0.2個であった、室温19°C、槽内温度22°C、設定温度200°Cで起動、約36分で200°C確認、過昇防止装置、タイマー等設定問題無し、異臭が酷い。

200°C



取扱説明書(有)

吸引流量2.83L/min

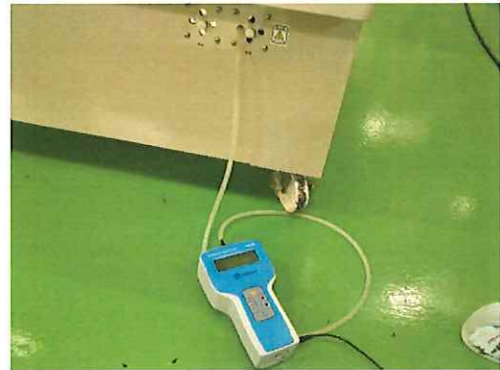

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)異臭が酷い。

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 3 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

