

管理番号

MB0302

動作確認チェックシート

検査日	2023年7月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	金属顕微鏡	電源電圧	1相 100V	ステージ	BM3-SIC6
型式	MX50A-F	周波数	50/60 Hz	レボルバ	自動
メーカー名	オリンパス	接眼レンズ	SWH10x-H/26.5	アナライザー/微分干涉	有
機械Ser.No	SWH10x-H/26.5	対物レンズ	LMPlanF1 100x UMPlanF1 5x/10x/20x/50x	外寸	W100D800H800
製造年月	年 月			重量	80 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○



備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常無し



・観察

サンプル:Mitsutoyo CHART-001

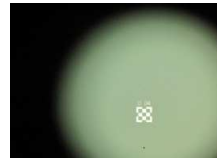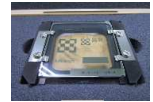

5x



10x



20x



50x



100x

・通電確認

ランプ点灯(調光) 確認

レボルバ切替ボタン回転 確認



・可動部確認

XY軸動作 異常なし

Z軸動作 異常なし



・明視野/暗視野

明視野/暗視野切替 確認



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

天野