

動作確認チェックシート  
(電子天秤)

検査日	2024年 3月 26日				
商品名	電子天秤	電源電圧 (ACアダプタ)	AC100-240V 50/60Hz 0.4A	内蔵分銅	無
型式	XAX3003	ひょう量	Max300g	モード	g・kg・%・pcs
メーカー名	アズワン	最小表示	0.001g		
機械Ser.No	220607865	直線性	±0.002g	通信機能	有
製造年月	—	繰り返し性	—	計量皿寸法	φ118

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。(指定の分銅を使用する)

- 繰り返し性テスト (同じ分銅を10回計量しその誤差を記入)
- 四隅誤差測定 右下の図の場所を測定 (100g分銅を使用)
- 直線性テスト (無加重・300gで・5点を測定。)


繰り返し性・直線性

単位:g

重さ	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	10回目	標準偏差
0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
75	74.996	74.995	75.000	75.000	74.997	74.997	74.998	74.999	75.001	74.998	0.002
150	149.998	149.996	150.001	149.999	149.997	150.000	150.002	150.001	150.003	150.002	0.002
225	225.045	225.044	225.047	225.047	225.044	225.045	225.050	225.048	225.052	225.047	0.003
300	300.052	300.048	300.049	300.047	300.046	300.044	300.052	300.054	300.054	300.048	0.003

四隅誤差測定 単位:g

①	100.000
②	100.001
③	99.997
④	100.000
⑤	100.002
標準偏差	0.002

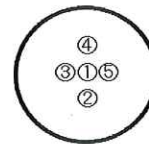

## 【コメント】

分銅は、校正されていないため、参考とする。

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 4 H]

検査担当者[ 三科 ]

ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日



