

# 動作確認チェックシート


検査日	2024年 3月 19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	電子秤	電源電圧	DC12~30V		
型式	ED4202S-CW	大きさ(W×D×H)	215×310×90mm		
メーカー名	ザルトリウス	計量皿(有効部)	180×180mm		
機械Ser.No	23603869	最大秤量	4,200g		
製造年月	不明	測定単位	0.01g		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△(※)
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

※計量皿表面若干取りきれない汚れあり。

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 測定、表示、スイッチ、セルフキャリブレーション等問題なし。
- 弊社所有の分銅を用いて測定を実施。誤差ほとんどなく問題なし。
  - 繰返し測定: 同一分銅(2,000g)を10回測定。誤差0で再現。
  - 5点測定誤差: 50g、2,000gの分銅で確認。2000gで-0.001gのばらつきは発生。
  - 直進性: 4000g超えて誤差発生するが極少。最小測定量は20mgであった。

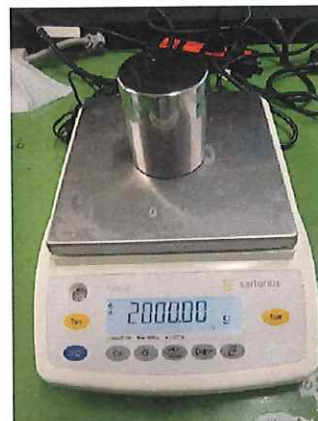

繰返し測定

測定回数	表示(g)	誤差(%)
1	2000.00	0
2	2000.00	0
3	2000.00	0
4	2000.00	0
5	2000.00	0
6	2000.00	0
7	2000.00	0
8	2000.00	0
9	2000.00	0
10	2000.00	0

5点測定

50.00	50.00
50.00	50.00
50.00	50.00
50.00	50.00
50.00	50.00

1999.99	2000.00
2000.00	2000.00
2000.00	2000.00
2000.00	2000.00
2000.00	2000.00

直進性

分銅(g)	表示(g)	誤差(%)
0.01	0.00	-
0.02	0.02	0
0.5	0.50	0
1	1.00	0
5	5.00	0
10	10.00	0
50	50.00	0
100	100.00	0
500	500.00	0
1000	1000.00	0
2000	2000.00	0
4000	3999.99	-0.00025
4200	4199.99	-0.00024
4201	HIGH	-

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1H]

ACアダプタ付属あり。

検査担当者[ 野沢 ]

