

動作確認チェックシート

検査日	2024年 11月 8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デシケーター(器具乾燥)	電源	AC100V	重量	約48Kg
型式	AG-WDN	周波数	50/60Hz	外寸	W858 D537 H1595
メーカー名	アズワン	電流	4.8A		
機械Ser.No	1146303	使用周囲温度	5~35°C		
製造年月	年 月	ヒーター	400W		


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■外観・・・異常無し



■タイマー機能(ヒーター制御)

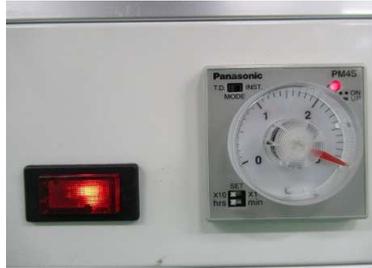

- ・タイマー動作時ランプ点滅確認
- ・設定時間にてヒーターが切れることを確認

■動作確認

2024/11/7 測定時環境
(温度21°C、湿度49%)



運転開始時

温度21°C、湿度49%

2024/11/8 測定時環境
(温度21°C、湿度45%)



連続運転24時間後

温度31°C、湿度20%



デシケーター内部環境
温度31°C、湿度20%
水で濡らした
プラスチック容器を投入。
1時間後には完全に
乾燥している事を確認

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数[4H]

検査担当者[菊竹]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

