

管理番号

051200

## 動作確認チェックシート

検査日	2024年8月21日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ピラニ真空計	電源	AC100V	
型式	GP-1000 / GP-1000H	周波数	50/60Hz	
メーカー名	アルバック	測定範囲	0.4~2700Pa	
機械Ser.No	23345 / 34196	測定切替	Pa / Torr	
製造年月	—			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

【 検査環境 】

- \* 社内排気セット : RP + TMP (\* RPのみ使用)
- \* 社内用測定機器 : ピラニ真空計 (アルバック製 ISG1)/測定子(アルバック製 SW1)
- \* O51200 ピラニ真空計(アルバック製 GP-1000+GP-1000H) / 測定子(アルバック製 WP-01 :社内用)




① GP-1000表示: 1.1Pa

② ISG1表示: 1.9Pa



\* GP-1000H 測定子: WP-01

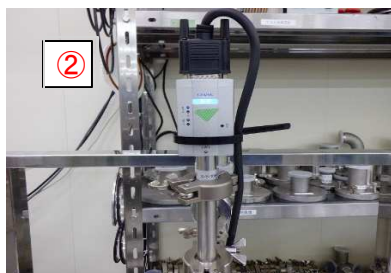

測定子: SW1

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[2.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

