

管理番号

060770

## 動作確認チェックシート


検査日	2024年 11月 25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	防振台	電源電圧	100-120V/200-240V/47-63Hz/50VA		
型式	TS-140	アクティブ制御範囲	約0.7Hz~100Hz(100Hz以上はパッシブ防振)		
メーカー名	ヘルツ	移動時ロック	電動ロック機構	使用温度範囲	5℃~40℃
機械Ser.No	244	高さ調整	自動調整	搭載可能重量	100kg(均等)
製造年月	年 月	防振台寸法	W500 D600 H84	架台寸法	W600 D700 H660

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)


機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■外観・・・問題無し

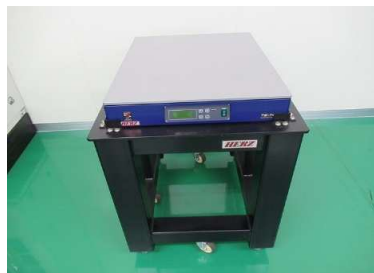

■動作確認

分銅10kgを下記図の順番(位置)に載せてそれぞれのウェイトバランスを確認

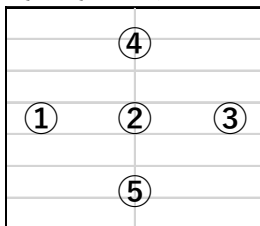

防振台

・ウェイトバランス表示(荷重分布確認)・・・問題無し



- ・高さ調整(自動)確認
- ・アクティブ制御ON/OFF切替確認
- ・振動波形表示(アクティブ制御ON)確認
- ・電動(自動)ロック/解除 確認



アクティブ 制御ON



振動波形



電動ロック中

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 5H ]

検査担当者[ 菊竹 ]

ユーザー名【 】 出荷日 年 月 日

