

管理番号

OB0266


動作確認チェックシート

検査日	2024年12月 4日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	プラズマリアクター	電源	AC100v 50/60Hz 1.5kVA
型式	PR500	設置寸法	440x600x760
メーカー	ヤマト科学	チャンバー	φ 216x250
製造年	2018 6		
製造番号	59900900		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

装置電源投入後ポンプスタート、数分で到達圧力10Pa以下。Arガス導入して放電確認OK
出力、タイマー、ガス流量調整問題なし。

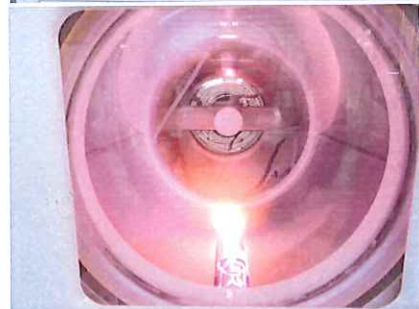

操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4 H]

* 石英チューブのフランジ下側にカケ有り、真空引きには影響はない。

検査担当者[横内]



ユーザー名 [

] 出荷日

年

月

日