

管理番号

P31014

動作確認チェックシート
(恒温槽)

検査日		2025年 7月 23日	電源電圧		1相 100V	ヒーター		ステンレスシースヒータ
型式		DRM320DB	周波数		50/60Hz	棚板		2枚
メーカー名		アドバンテック	ヒーター		0.8 Kw	内寸		W310D300H300
機械Ser.No		150100010	内容積		約28 L	外寸		W440D485H660
製造年月			排気口		φ28mmx2個	重量		35 Kg

《温度範囲》

40℃～270℃

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4 温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(装置運転)	○
5 プログラム機能	温度制御機能は正常か。(適当な温度を入力し確認する)	
6 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近)	○

最高・最低温度到達時間

23℃ → 270℃ 約50 分

℃ → ℃ 分

条件 ダンパー=閉 Ta=


備考 (動作確認追記事項・不具合内容等)

・装置運転

庫内温度23℃から仕様最高温度(270℃)到達まで 約50分

庫内実温度測定(参考値) 測定器: 社内測定器(LR8500)

・外観 …異常なし

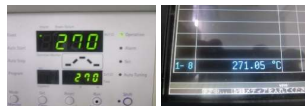運転開始前
25℃運転開始から約50分後
270℃
(社内測定器271.05℃)

・通電確認

表示部表示 確認


スイッチ操作 確認



・温度過昇防止器動作

ALARMランプ点灯 確認

運転停止 確認

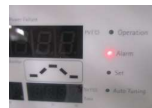

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

FileMaker入力

動作 (OK)

作業工数[3h]

(備考欄コメント)

扉開けても運転継続します

[責任者]

検査担当者 [

Tokunaga]

ユーザー名 [

出荷日 年 月 日

穂苅

ASK INDEX