

P40098


動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月 16日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	積分球測定システム	電源電圧	単相100V	分光放射輝度計	CS-2000 コニカミノルタ
型式	CA-10236-000, CSTM LMS400	周波数	50/60Hz	DC電源	PAS80-4.5 菊水電子
メーカー名	labsphere	大きさ(W×D×H)	1300×1200×1750	直流電圧,直流 電源モニタ	R6243 ADVANTEST
機械Ser.No	0317101638	使用ソフト	CS-S10w		
製造年月	不明	測定対象	全光束測定		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (未対象) TP (未対象) BT交換 (未対象)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 対象は分光放射輝度計を用いた、全光束測定である。参考及び比較可能なデータがないため、取説に沿ったデータ取得のみとし、精度は不問とした。また出力2.6A要のため電源はPAS80-4.5のみ使用。(R6243は±110V, ±2A max)
- (1)標準ランプによるレベル校正 (2)自己吸収補正係数測定(標準光源、ターゲット光源) (3)サンプル測定 を実施。
特に問題なく終了。

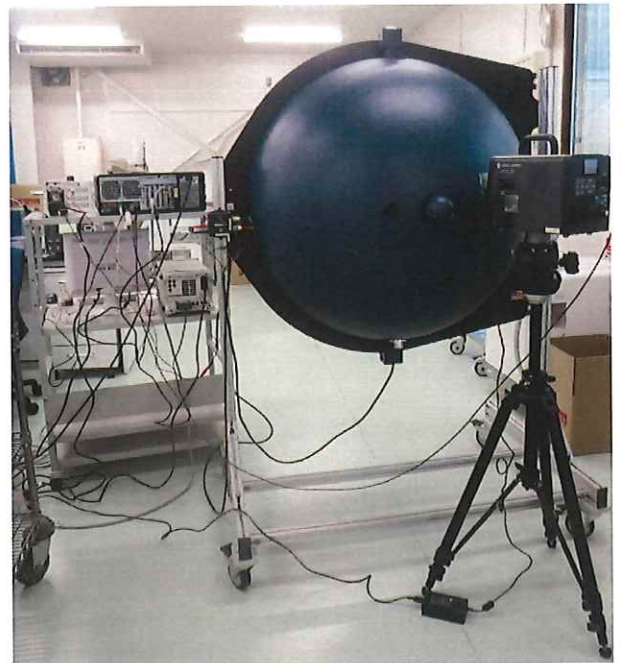

取扱説明書(有 PAS80-4.5, R6243は電子ファイル)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[9H]


検査担当者[野沢]




分光放射輝度計



レベル校正

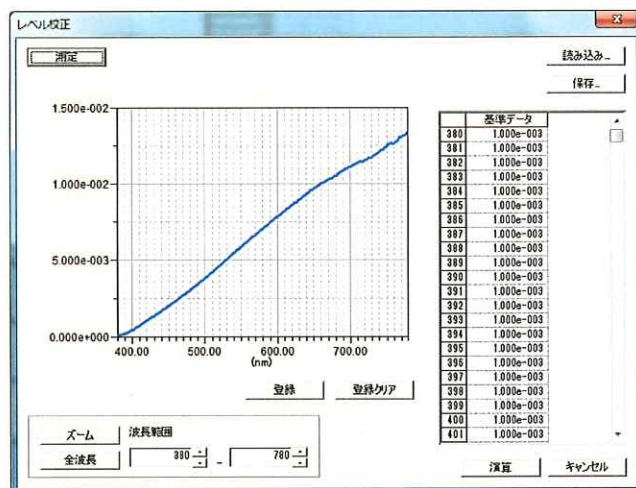

自己吸収補正係数測定(標準光源、ターゲット光

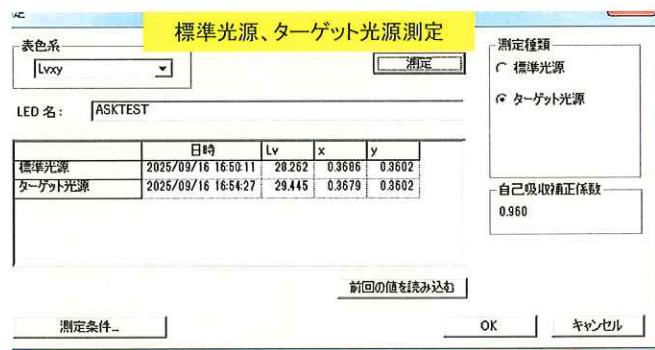

自己吸収補正用ラン

サンプル測定

