

動作確認チェックシート

検査日	2025年10月14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンロッカー	電源電圧	AC100V		
型式	APU-150-01	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	アズワン	FFU	2個		
機械Ser,No		FFUフィルター	集塵効率99.99%(0.3 μ m)		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- FFU外されている、フィルター横をテープで封止、パーティクル測定、フィルターセンター及び角から30mm。
- 計5箇所測定、1分測定、1箇所平均0.3 μ m2個、0.5 μ m0個であった(FFU2個共)
- FFU吸引部は天井板に固定されている、FFU取付後グロメットで封止される。
- ビニールカーテン一部破れ、テープで補修。

FFU 取付後グロメット封止



吸引部外されている。

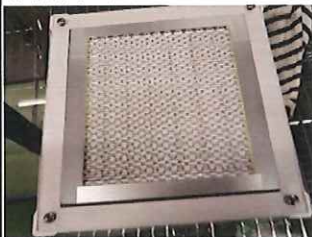

取扱説明書(無)

テープで封止



パーティクル測定、吸引流量2.83L/min



FFU 吸引部天井板に固定



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

