




動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月 17日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	接触角測定器	電源電圧	単相100~240V, 20VA (パソコン含まず)	最大試料寸法 (W×D×T)	150×150×35mm
型式	DM-500	周波数	50/60Hz	カメラ・ディスプレイ サ上下可動範囲	ステージ表面に対し +0~+35mm
メーカー名	協和界面科学株式会社	大きさ(W×D×H)	530×300×370mm	ステージ可動範囲	前後:75mm 左右:150mm
機械Ser.No	035-00545	撮影方式	GCDカメラ	ステージ回転 可動範囲	360°
製造年月	不明	レンズ	2.5×ズーム	ピント調整範囲	20mm

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (未対象) TP (未対象) BT交換 (未対象)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 各部の動作から測定に至るまでの異常なし。ソフトウェアのライセンスは[液滴法]の測定方法のみ。
 - 2 液滴標準サンプルを用い、画素の校正実施。問題なし。
- Siペアウエハ及びAL膜付ウエハに、水道水を用いて測定を実施。θ/2法、接触角法による解析等問題なし。

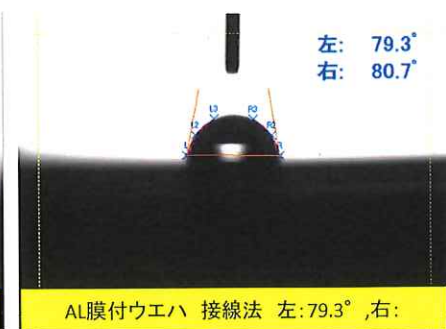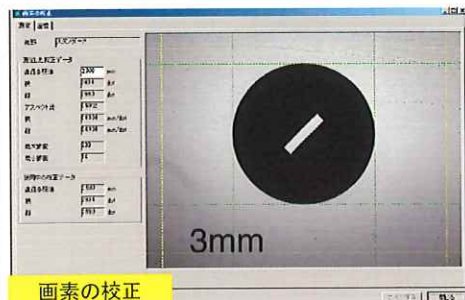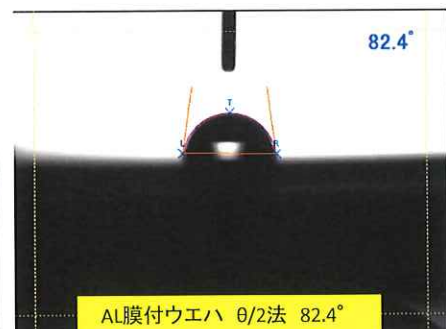

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2025年10月6日	『Battery Low』エラー発生。パソコン立上らない時あり。バッテリーセル交換。	野沢

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4.5H]

検査担当者[野沢]

早川