

管理番号

P90030

動作確認チェックシート

検査日	2025年11月13日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー(空冷)	入力電源	AC100V 50/60Hz	温度調節範囲	-20~30℃(ヒータ無)
型式	CA-1115D	重量	約43kg	対応循環水	上水
メーカー名	東京理化器械	外寸法 W*D*H	354*384*910		エチレングリコール
機械Ser.No	11510711	液量	14L		ナイブラインZ-1・NFP
製造年月	—	外部循環能力	最大流量12/14L/min		エタブラインEC-Z

チェック項目	主な確認内容			チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。			○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。			○
3 SW設定	SWの機能は正常か。			○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。			○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る			○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG)	TP (済・未対象・NG)	BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 外観確認 : 問題無し

2 スイッチ確認 : 問題無し


3 起動確認 : 問題無し

準備① 水槽にナイブラインZ1を14L充填

準備② IN/OUT配管にポリウレタンチューブを直結し、保温材で覆う

結果① 現在温度17℃、設定温度-20℃で起動スタート → 現在温度-20℃到達所要時間は約60分 OK

結果② 社内フローメータでの指示流量は約10L/min(ナイブラインを排水し、上水で確認) OK

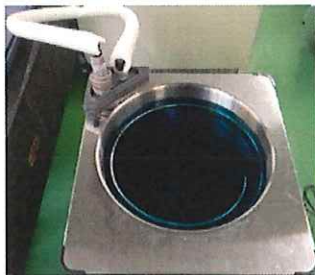

準備①、②



結果①



結果②



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5H]

検査担当者[天野(正)]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日



ASKINDEX